
Infizierte Wunden

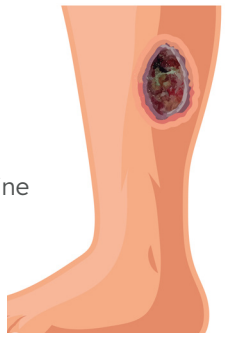

Wie entsteht die Wunde?

Infizierte Wunden entstehen, wenn Krankheitserreger wie Bakterien in eine Wunde eindringen und dort eine lokale Entzündung auslösen. Dies kann den Heilungsprozess erheblich verzögern und zu Komplikationen führen. Typische Entzündungszeichen sind Rötung, Überwärmung, Schwellung, Schmerzen und / oder eine eingeschränkte Funktion der betroffenen Körperstelle.

Treten bei infizierten Wunden zusätzliche Symptome wie Fieber, Nachtschweiß oder ein allgemeines Krankheitsgefühl auf, kann dies auf eine Ausbreitung der Infektion hindeuten. In solchen Fällen ist sofort ärztlicher Rat einzuholen, da es möglich ist, dass sich die lokale Infektion zu einer systemischen entwickelt hat.

Risikofaktoren u. a.

- Ein geschwächtes Immunsystem (z. B. durch bestimmte Medikamente, wie bei Psoriasis, oder Grunderkrankungen wie Diabetes)
- Chronische Wundsituationen
- Höheres Lebensalter
- Schlechte Wundhygiene und fehlende Wundabdeckung

Fragen und Hinweise für die Beratung


- **Ist die Haut um die Wunde gerötet, warm, geschwollen und / oder haben Sie (mehr) Schmerzen im Bereich der Wunde?**
  Dies sind Anzeichen für eine Infektion, die Wunde muss ärztlich begutachtet werden.
- **Wie decken Sie die Wunde beim Duschen ab?**
  Erhält der Patient bereits Wundversorgungsmaterial, kann ein z. B. ein DracoFixiermull waterproof als wasserfeste Verbandfixierung dienen, die das Duschen ohne zusätzlichen Verbandwechsel ermöglicht.
- **Wie säubern Sie die Wunde?** Auf die Wundhygiene sollte in jedem Fall geachtet werden. Bei nicht infizierten Wunden genügt die Reinigung mit steriler Kochsalzlösung und einer sterilen Kompresse, bei stark verschmutzten Wunden kann aseptische Wundbehandlung z. B. mit Octinisept ratsam sein. Bei chronischen Wunden sollte die Wundreinigung immer von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden.

Bei ersten Infektionsanzeichen




	DracoPor soft weiß		DracoFix Mullkompressen, steril		DracoFixiermull waterproof	
Varianten und PZN	3,8 x 3,8 cm 5 x 7,2 cm 9 x 25 cm 10 x 20 cm weitere Größen verfügbar	10713787 02027032 19351222 09763389	5 x 5 cm 7,5 x 7,5 cm	02358674 02358697	10 cm x 2 m 10 cm x 10 m	16890088 16890094
Wann wird die Wundauflage verwendet?	• oberflächliche Wunden • schwache bis mäßige Exsudation • nur intakte Wundumgebungshaut		• Primärversorgung akuter Wunden • Reinigung von Wundoberflächen		• wasserdichte Klebefolie zum Wundschutz beim Duschen • nur intakte Wundumgebungshaut	
Körperstelle	variabel		variabel		variabel	
Zusätzliche Fixierung?	Nein		Ja		Nein	

Chronische infizierte Wunden

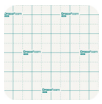



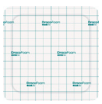

	DracoFoam Infekt		DracoFoam Infekt haft sensitiv		DracoFoam Infekt Pro	
Varianten und PZN	5 x 5 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm	10317608 10317614 10317620 10317637	7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 12,5 x 12,5 cm	15623296 15623304 15623310	5 x 5 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 18 x 18 cm	19964031 19964143 19964166 19964077
Wann wird die Wundauflage verwendet?	• infizierte Wunden • oberflächliche & tiefere Wunden • mäßige bis starke Exsudation • intakte & nicht intakte Wundumgebungshaut		• infizierte Wunden • oberflächliche & tiefere Wunden • mäßige bis starke Exsudation • nur intakte Wundumgebungshaut		• infizierte Wunden • oberflächliche & tiefere Wunden • mäßige – starke Exsudation • intakte & nicht intakte Wundumgebungshaut	
Körperstelle	variabel		variabel		variabel	
Zusätzliche Fixierung?	Ja		Nein		Ja	

DRACO

Tipp: Die Produktübersicht zeigt nur einen Ausschnitt des Sortiments. Viele Draco Produkte sind auch als infekt für infizierte Wunden oder mit Haftrand auch als sensitive Variante für empfindliche Haut verfügbar.